

DAS NOVAFON PUISSANCE 2

DIS SALUT! VERS L'AVENIR DE LA RÉCUPÉRATION



CONTENU

01 – introduction

02 – faits

03 – fréquences

04 – connectivité Bluetooth

05 – Application NOVAFON

06 – pièces jointes

07 – borne de recharge

08 – contenu de la livraison

09 – données techniques

01 – INTRO

Découvrez notre nouvel ajout le plus intelligent à la famille NOVAFON : DAS NOVAFON power 2. Un spectre d'intensité inédit et 3 niveaux de fréquence vous attendent, rendant votre application/ thérapie NOVAFON encore plus efficace. Connectez simplement l'appareil à notre application gratuite NOVAFON pour faciliter votre routine thérapeutique quotidienne et garder toujours un œil sur la progression de votre traitement.



02 – FAITS

- Affichage LED
- 15 plages d'intensité, réglables finement via l'application NOVAFON
- 3 fréquences : 100 Hz / 75 Hz / 50 Hz
- Verrouillage de transport via la fonction Travel Lock
- Connectivité Bluetooth à l'application NOVAFON
- Protection contre les éclaboussures IP 44
- Chargement facile via contact magnétique | douille à broches magnétiques
- Couleur de l'appareil : noir
- Le mode de fonctionnement est identique aux modèles précédents
- L'appareil dispose d'un capteur de pression qui s'allume lorsqu'on appuie trop fort
- Tous les accessoires des appareils rechargeables sont compatibles avec THE NOVAFON power 2, les accessoires sont également disponibles dans la nouvelle couleur noire
- Les bornes de recharge des modèles précédents ne sont pas compatibles avec cet appareil



03 – FRÉQUENCES

TROIS RÉGLAGES DE FRÉQUENCE

Avec un total de trois fréquences différentes - 100, 75 et 50 Hz, DAS NOVAFON power 2 permet un traitement systématique de chaque région du corps.

100 Hz

ALLÉVIATION DES DOULEURS MUSCULAIRES

Lorsque le stimulus sensoriel de la vibration atteint les fibres nerveuses, la transmission des signaux de douleur au cerveau peut être interrompue car le stimulus sensoriel l'emporte sur le stimulus douloureux. Cet effet, connu sous le nom de « théorie du contrôle des portes », peut durer longtemps après le traitement s'il est utilisé régulièrement.

Ainsi, la douleur peut être soulagée – sans aucun médicament.

75 Hz- SEULEMENT DAS NOVAFON PUISSANCE 2

ACTIVATION MUSCULAIRE

Les douces vibrations activent les muscles.


RÉGÉNÉRATION ACTIVE

Les mécanismes de régénération du corps sont stimulés par la stimulation des tissus profonds. Les muscles peuvent récupérer plus rapidement et les performances physiques sont augmentées. La circulation sanguine est stimulée et les muscles sont mieux approvisionnés en produits métaboliques comme l'oxygène.

50 Hz

LIBÉRATION DES TENSIONS & DÉTENSION DE LA MUSCULATURE

Les vibrations profondes relâchent les tensions musculaires et détendent les tissus durcis - de la tête aux pieds : des muscles de la mâchoire jusqu'au tendon d'Achille/arrière-train.

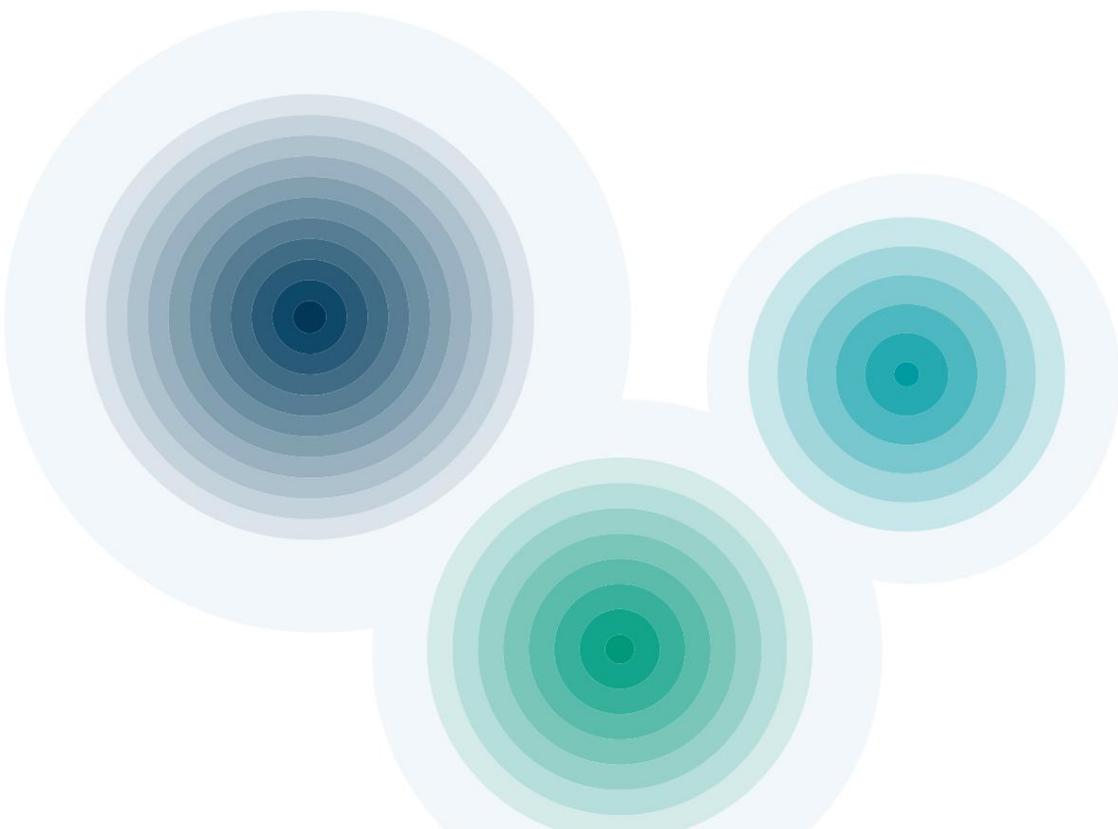


04 – CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

Il est possible de connecter DAS NOVAFON power 2 directement à l'application NOVAFON. Cette connectivité Bluetooth directe permet un traitement encore plus simple avec un total de 15 niveaux d'intensité.

Le large spectre d'intensité permet un traitement systématique de chaque muscle. Doux pour les zones sensibles et douloureuses du corps, peut être utilisé de manière intensive sur les groupes musculaires compacts.


Comment se connecter à votre appareil :

- Activez la connexion Bluetooth en appuyant sur le bouton d'intensité pendant env. 5 secondes.
- Le symbole Bluetooth apparaît à l'écran
- Bouton multifonction et bouton d'intensité à coupler avec application/smartphone
- « Recherche » apparaît
- Confirmez dans l'application NOVAFON
- Connexion automatique après la remise sous tension du DAS NOVAFON power 2

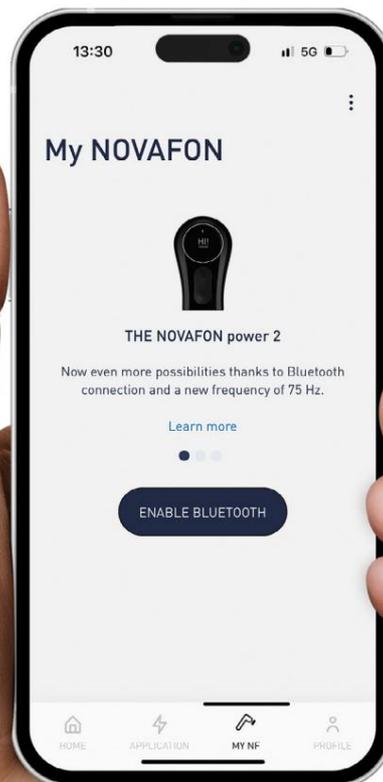

05 – APPLICATION NOVAFON

- Individualisation du texte de salutation
- Choix de combinaisons de couleurs individuelles
- Affichage des statistiques d'utilisation
- Sélection de niveaux d'intensité individuels parmi cinq gradations
- Concevoir des programmes de traitement individuels
- Stockage des niveaux d'intensité individuels dans l'application
- Réglage direct du niveau d'intensité via l'application

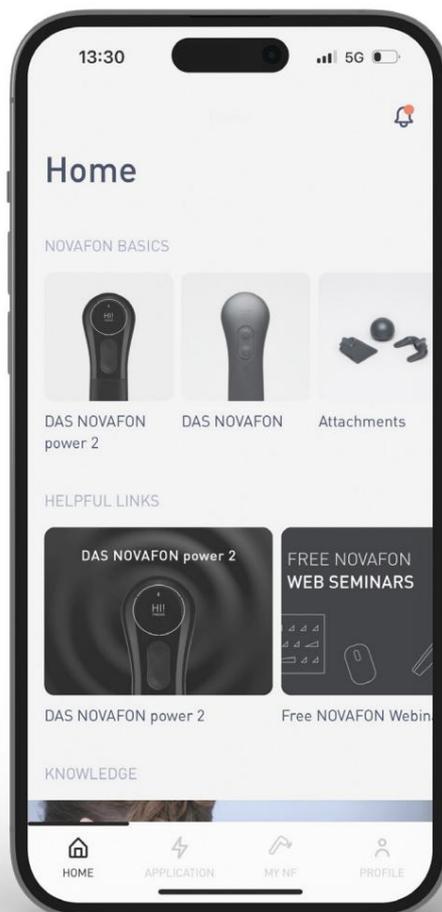

06 – ACCESSOIRES

Tous les accessoires des modèles précédents alimentés par batterie sont compatibles avec DAS NOVAFON power 2. Mais tous les accessoires seront également disponibles dans la nouvelle couleur noire.

Les pièces jointes correspondantes :

- Set de rééducation
 - Fixation du cône
 - Attachement Hérisson
 - Attachement de disque
- Physio-Set
 - Boule de fascia
 - Fourche de façade
 - Cale de fascia
- Fixation magnétique
- Poignée d'extension
- Attachement intra-oral



07 – BORNE DE RECHARGE

DAS NOVAFON power 2 se charge à l'aide d'un câble avec fixation magnétique. Ce câble est inclus dans la livraison. LE NOVAFON power 2 peut également être chargé avec une station de charge. Cette borne de recharge peut être achetée en complément de l'appareil. Les bornes de recharge des appareils SK3 (DAS NOVAFON power) ne sont pas compatibles avec les nouveaux appareils.

Un câble USB-C est inclus avec la station de recharge.





08 – ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

- DAS NOVAFON puissance 2
- Attachement de disque (attachement standard)
- Attache boule (attache standard)
- Câble de chargement USB-A vers contact magnétique
- Adaptateur secteur USB (UE)



09 – DONNÉES TECHNIQUES

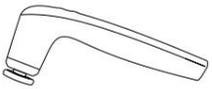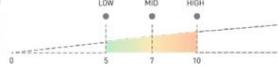	DAS NOVAFON PUISSANCE 2	DAS NOVAFON PUISSANCE	DAS NOVAFON
			
ANWENDERGRUPPEN	Selbstanwender/Sportler Physiothérapeutes Professionnel de la santé	Selbstanwender/Sportler Physiothérapeutes Professionnel de la santé	Selbstanwender Logopages Ergothérapie Professionnel de la santé
ANWENDUNGS- GEBIETE	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung von Schmerzen, Verspannung, Sportverletzungen, Narben, CMD, Arthrose, logopädischen & neurologischen Krankheits-bildern et zur Régénération	ganzer Körper Empfohlen zur Behandlung kompakter Muskelgruppen & orthopädischer Erkrankungen comme zB Muskelverspannung-gen, Sportverletzungen uvm	ganzer Körper Empfohlen zur Behandlung empfindlicher Körperstellen & Erkrankungen comme zB Sehnen- erkrankungen, Arthrose, Narben, CMD uvm
INTENSITÉS- ABSTUFUNGÈNE			
PRODUITS MERKMALE			
Fréquence	100 Hz 75 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz
Tiefenwirkung	6 cm +	6 cm +	6 cm
Akkuleistung Ø	3400 mAh	3400 mAh	2400 mAh
Gesamt- Temps d'Akkulauf	3,5 heures	3,5 heures	3,5 heures
Amplitude	0,3 – 4mm	0,3 – 4mm	0,3 – 3,5mm
Tiefenwirkung	6 cm +	6 cm +	6 cm
Résistance à l'eau	IP44 – Spritzwassergeschützt IP22 – Tropwassergeschützt IP22 – Tropwassergeschützt		
Gewicht Poignée de main	250 g	245g	243g
Abmessungen	83 x 187 x 38 mm (L x H x T)	83 x 187 x 38 mm (L x H x T)	83 x 187 x 38 mm (L x H x T)
Température de fonctionnement 5°C à 30 °C 15% à 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C à 30 °C 15% à 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C à 30 °C 15% à 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C à 30 °C 15% à 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck
Stockage/Transport	-5°C à 40 °C, jusqu'à 93 % de feu relatif, sans risque de condensation, 500 hPa jusqu'à 1060 hPa Luftdruck	-5°C à 40 °C, jusqu'à 93 % de feu relatif, sans risque de condensation, 500 hPa jusqu'à 1060 hPa Luftdruck	-5°C à 40 °C, jusqu'à 93% relatif Feu, non condensé, 500 hPa à 1060 hPa Luftdruck
Eingangsleistung	CA 100-240 V, 50-60 Hz	CA 100-240 V, 50-60 Hz	CA 100-240 V, 50-60 Hz
Ausgangsleistung	C.C 5 V, 2 A	C.C 5 V, 2 A	C.C 5 V, 2 A
Art de la publicité	Ko 20/15 min	Ko 20/15 min	Ko 20/15 min
Nennaufnahme	9,5 W	9,5 W	9,5 W
Akku	Batterie au lithium-ion. Kapazität 3400 mAh. Prise 3,7V Type ICR 18650, 12,85 Wh	Batterie au lithium-ion. Kapazität 3400 mAh. Prise 3,7V Type ICR 18650, 12,85 Wh	Batterie au lithium-ion. Kapazität 2400 mAh. Spannung 3,7V Typ INR 18650, 8,8 Wh
Geräusch de Betriebs	maximum. 70 dBA	maximum. 70 dBA	maximum. 70 dBA
EMV	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse A et Gruppe 1. Störfes-tigkeits- Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse A et Gruppe 1. Störfes-tigkeits- Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse A et Gruppe 1. Störfes-tigkeits- Prüfpegeln für den Heim-gebrauch
Bluetooth	2,4-2 483 GHz ; Modulation DSSS, type GFSK 1 000 kbps ; Effektive Abgestrahlte Leistung <0,15 mW à 25mm Abstand	-	-

Depuis plus de 90 ans, NOVAFON – ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE GMBH fabrique des appareils électromédicaux. Avec la marque NOVAFON, nous sommes les ambassadeurs de la thérapie vibratoire locale et représentons la qualité et la fiabilité dans ce domaine. Nos appareils thérapeutiques éprouvés sont fabriqués en Allemagne. En tant que fabricant de dispositifs médicaux, notre processus de gestion de la qualité est certifié selon la norme DIN EN ISO 13485 et nos produits sont régis par des règles de sécurité strictes pour garantir la sécurité et le bien-être de nos clients.



Dispositif médical certifié

NOVAFON est certifié par TÜV SÜD en tant que fabricant de dispositifs médicaux. La thérapie par vibration a fait l'objet de recherches pour son efficacité et

les résultats de cette recherche ont été publiés dans de nombreuses études.



Fabriqué en Allemagne

Notre promesse de qualité : les plus hauts standards de fabrication et de matériaux. Longue durée, produits fiables. Assurance qualité complète.

 Des produits
novafon.de/produits

Webinaires
novafon.de/web-seminar

NOVAFON –
Électromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstr. 13
71384 Weinstadt Allemagne

info@novafon.de | +49 7151 133970
www.novafon.com



[novafon_com](https://www.facebook.com/novafon_com)
[novafon_vet](https://www.instagram.com/novafon_vet)